


登录到 IMPAX

1. 如果没有显示登录屏幕，可在桌面上双击 IMPAX 客户端快捷方式。
或者，选择开始 > 所有程序 > Agfa IMPAX > IMPAX 客户端。
2. 选择不同的集群或域。
3. 在 IMPAX 登录屏幕中，键入您的用户编号和密码。
密码区分大小写。如果键盘上启用了 Caps Lock，单击“密码”字段时将出现一条警告消息。
4. 单击登录。


从影像区将检查传送到其它位置

1. 要传送两个或多个影像或影像序列，请使用影像选择工具选择要传送的影像或影像序列。
2. 右键单击要传送的影像。
3. 在上下文菜单中，选择传送 > 检查、影像序列、影像或已选影像。
4. 在“正在发送”对话框中，从传送列表中选择要传送到至的工作站。
5. 单击传送。

将检查传送至其它工作站


1. 在工作列表或搜索结果中，选择要传送的检查。
2. 在工作列表栏或“高级搜索”菜单  中，选择传送。
3. 在“正在发送”对话框中，从传送列表中选择要传送到至的工作站。
4. 单击传送。

调整窗宽窗位：更改亮度和对比度


1. 在“影像”区域顶端工具栏的“窗宽窗位”按钮菜单中，选择窗宽窗位。 
2. 必要时，请更改要调整窗宽窗位的影像、影像序列或检查的范围。

3. 单击要调整的影像。
4. 通过以下方法调整亮度和对比度。
要更改亮度（窗口中心数值），请向上或向下移动鼠标。要更改对比度（窗口宽度数值），请将鼠标从一侧移向另一侧。要确保只更改亮度值，请在按住 Ctrl 的同时上下移动鼠标。要确保只更改对比度值，请在按住 Ctrl 的同时将鼠标从一侧移向另一侧。
5. 要设定窗宽窗位，请单击所需亮度和对比度值所对应的位置。

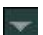
将影像向左旋转 90°

1. 如有必要，可选择要旋转的多个影像或影像序列。
2. 在“影像”区域顶端工具栏的“几何”按钮菜单中，选择左旋。 
3. 必要时，更改影像、影像序列或检查的范围。
4. 单击要旋转的影像。


将一个检查中的影像拆分到另一个检查

1. 在“列表”区域中，使用“高级搜索”查找要拆分的检查。
2. 在“高级搜索”栏菜单  中，选择拆分。
3. 选择 RIS 医嘱、PACS 检查或者创建新检查。
4. 键入或选择搜索前...天值。
5. 单击搜索。
6. 在“拆分”搜索结果中，选择要关联到检查影像的医嘱。
7. 单击拆分。
8. 在“影像”区域将出现浮动的“拆分”选项板，显示医嘱及“分段”和“取消”按钮。医嘱前会显示一个符号。此处将给出不可显示的 DICOM 对象。
9. 在“拆分”选项板中，选择医嘱。
10. 单击要与选定医嘱相关联的检查影像。
11. 在“拆分”选项板中，单击拆分。

将多个检查合并至单个检查

1. 为找到要合并的检查，请在“列表”区域中使用高级搜索。
2. 在搜索结果中，选择要合并的检查。
3. 在“高级搜索”栏菜单  中，选择合并。
4. 如果所选定的检查不属于同一位患者，将显示警告。单击确定。
5. 在“合并”对话框中，选择要将影像合并到的检查。
6. 单击合并。
7. 如果合并成功，将显示一个对话框指示成功。单击确定。

将一个检查分段为多个检查

1. 在“列表”区域中，使用“高级搜索”查找要分段的检查。
2. 在搜索结果中，选择要分段的检查。
3. 在“高级搜索”栏菜单  中，选择分段。
4. 键入或选择搜索前...天值。
5. 单击搜索。
6. 在“分段”搜索结果中，选择要关联到检查影像的所有医嘱。
7. 单击分段。
8. 在“分段”选项板中，选择要与检查影像相关联的医嘱。
9. 单击要与选定医嘱相关联的检查影像。
10. 单击分段。

键盘快捷键：列表区域

要	按
打开知识库。	F1

常规影像处理工具

按钮	名称	用途
	水平翻转	沿水平轴旋转影像
	垂直翻转	沿垂直轴旋转影像
	测量角度	测量影像中的角度
	标注标记	向影像添加文本
	刻度标记	测量影像上两点间的距离
	椭圆形标记	测量影像的椭圆形区域
	不规则形状标记	使用自定义多边形测量影像中的区域
	矩形标记	测量影像的矩形区域
	旋转 180 度	旋转影像 180 度
	左旋	将影像向左旋转 90 度
	右旋	将影像向右旋转 90 度
	卷查看	在“卷查看”窗口启动序列进行 MIP、MPR 和 (如果已授权) 3D 分析
	窗宽窗位	更改影像亮度和对比度
	缩放	以增量方式放大或缩小影像

键盘快捷键：影像区域

要	按
导航前进到检查中的下一页、下一个影像，或下一个标签 (取决于“前进方式”工具的状态)。	Page Down *

要	按
导航回到检查中的前一页、前一个影像，或前一个标签 (取决于“前进方式”工具的状态)。	Page Up *
导航前进到循环列表中的下一个患者或者打开患者检查。	右箭头
导航回到循环列表中的前一个患者或者打开患者检查。	左箭头
导航到序列中的第一个影像。	Home
导航前进到当前患者的下一个检查。	上箭头
导航回到当前患者的前一个检查。	下箭头
导航到序列中的最后一个影像。	End
按定位切片导航时返回到第一个帧。	Home
使用“缩放”工具放大影像。	Page Up *
使用“缩放”工具缩小影像。	Page Down *
使用“缩放”工具恢复原始放大率。	Home
增加放大镜工具的放大率。	Page Up **
减少放大镜工具的放大率。	Page Down **
恢复放大镜工具的原始放大率。	Home
打开“自定义”对话框。	F12
打开 IMPAX 6.5.1 客户端 知识库。	F1